


## Wiederherstellen der Delphex-CE und -LE mittels Acronis Restore

1. Zur Wiederherstellung sind eine USB-Tastatur und eine USB-Maus notwendig.  
Schliessen sie die beiden Komponenten an die USB-Buchsen unterhalb des Monitors an.


Starten Sie den POC neu und beobachten sie den Bildschirm. Direkt nach dem Start erscheint die Meldung „Zur Wiederherstellung drücken sie die Taste F11 (Acronis)“.

Je nachdem welche Acronis-Version auf ihrem POC installiert ist, erscheint folgender Bildschirm:

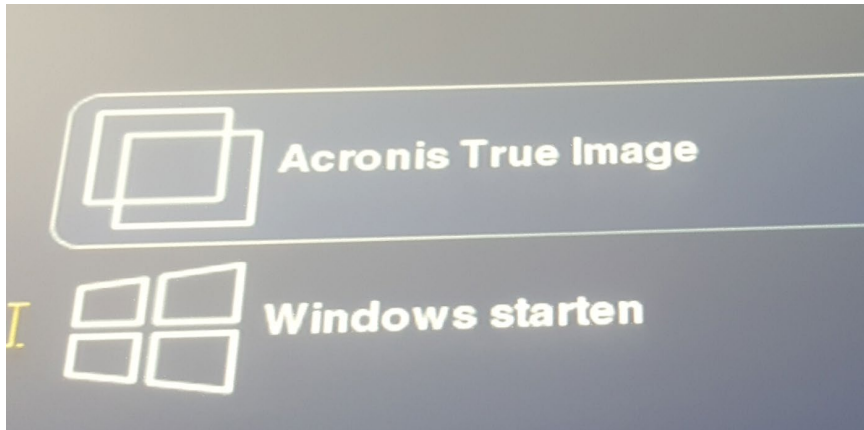


Wählen sie Option „Acronis True Image“ mit den Cursor-Tasten aus und drücken sie „Enter“. Jetzt startet das Acronis-Programm.

Wählen sie „Recovery Laufwerke“ aus

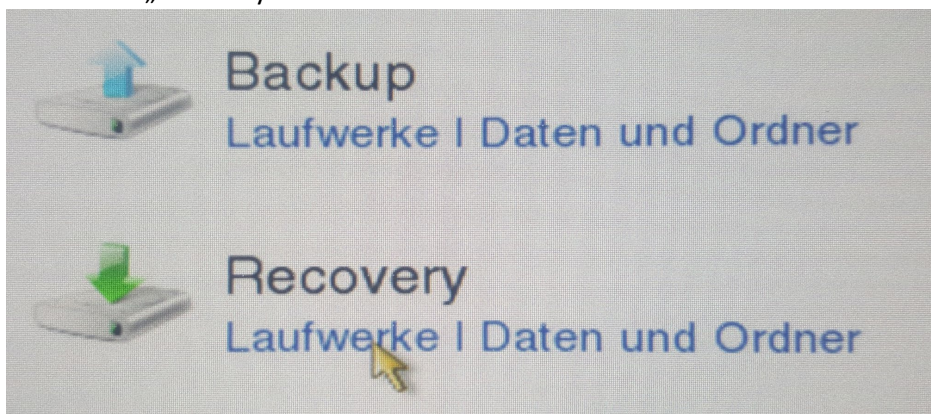


Jetzt müssen sie dem Acronis nur noch sagen, wo das Backup liegt, dass der MaWi Support beim Einrichten des POCs angelegt hat.

Wählen sie in der nächsten Maske „Durchsuchen“

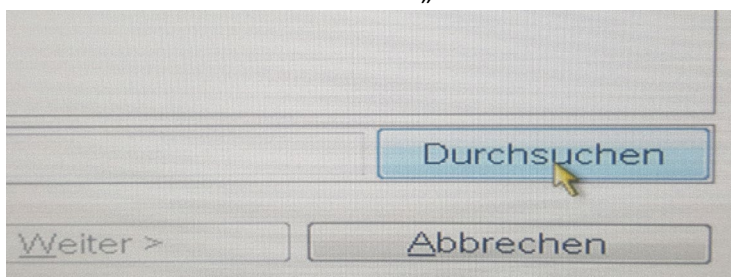


Jetzt kann es einen Moment dauern, bis Acronis ihr System und ihr Netzwerk durchsucht hat. In der

Regel liegt das Backup auf einer eigenen „Acronis-Secure-Zone (ASZ)“ oder auf dem Laufwerk „D:“. Wenn es das Laufwerk D nicht gibt, dann wählen sie zunächst Acronis Secure Zone (nicht Acronis Cloud).

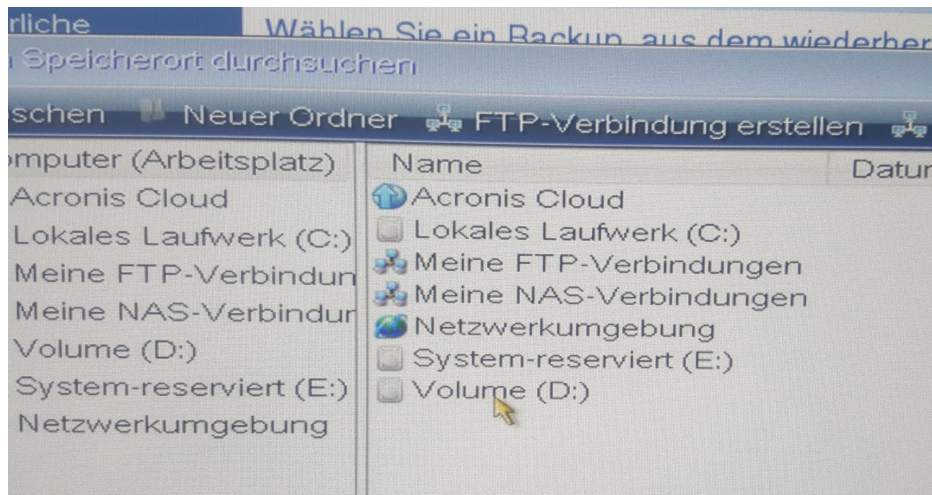


Wählen sie nun die Datei aus. In der Regel beginnt sie mit „Kompletter PC...“

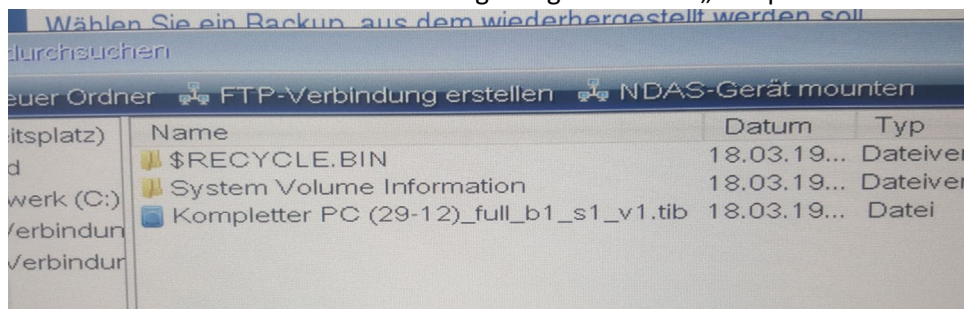

Entweder drücken sie die rechte Maustaste und wählen den Punkt „Recovery“, oder sie drücken unten "OK.“

Jetzt wählen sie die Recovery Methode „Recovery kompletter Laufwerke ....“ aus.

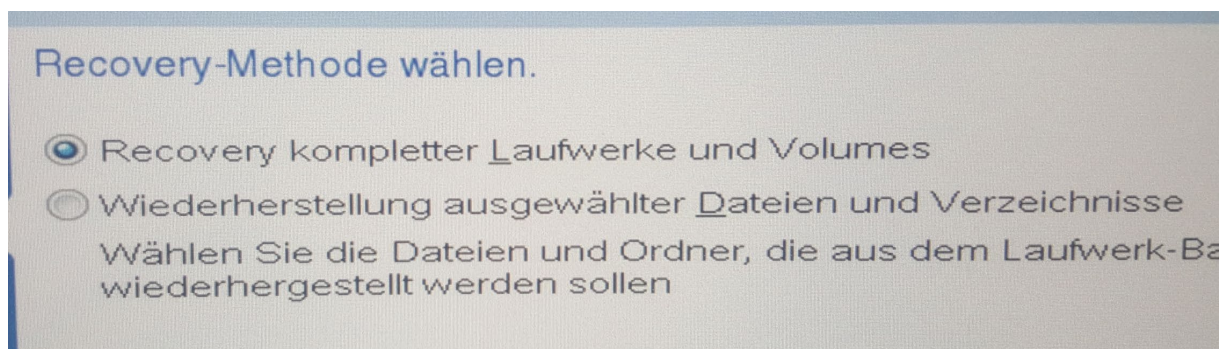

Jetzt sind sie fast fertig. Acronis meldet jetzt noch weitere Informationen. Bitte klicken sie unten einfach auf „Weiter“, bis die Wiederherstellung startet.

Nach dem Abschluss sollte der POC neu starten und das Delphex wieder starten. Leider müssen sie die User neu anlegen, aber dass sollte ja schnell gehen